

コラントッテ TAO ネックレス

# 取扱説明書




Colantotte®

## ■コラントッテ TAO ネックレスは医療機器です。

コラントッテ TAO ネックレスは樹脂コーティングゴム磁石を、独自のN極S極交互配列で配置した医療機器です。

医療機器として認証されている本物の健康ギアの効果を、体感できます。

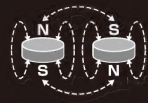

独自のN極S極交互配列

## ■磁気力で血行改善、コリを緩和。

ネックループ部全体に55mTの磁気がコラントッテ独自のN極S極交互配列で10mm間隔に配置されています。これによりコラントッテ TAO ネックレスは装着部位の血行を改善し、コリを緩和します。


～TAO～

TAOとは中国哲学で説かれている「道」を表しています。宇宙自然の普遍的法則や存在の根源、美や真実の根元などを広く意味する言葉です。

すべての真理と説かれ、  
悠然と変わることなく存在し、  
揺ぎないもの。

それがTAOなのです。

ネックループ部全体に55mTの磁気がコラントッテ独自のN極S極交互配列で10mm間隔に配置されています。これにより装着部位の血行を改善しコリを緩和します。

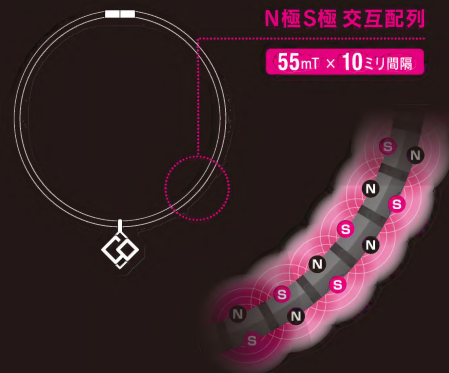

## ■製品仕様

Spec: 55mTの磁気を10mm間隔でN極S極交互配列

Material: <コラントッテ TAO ネックレス>  
ゴム磁石、ステンレス  
<コラントッテ TAO ネックレス KYOTO OPAL>  
ゴム磁石、ステンレス、京都オパール  
<コラントッテ TAO ネックレス CERAMICS>  
ゴム磁石、ステンレス、ジルコニアセラミックス

医療機器認証番号: 221AGBZX00065000

〈製品についてのお問い合わせは下記まで〉

areQuest

製造販売元 株式会社アーク・クエスト

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-10-26

TEL(06)6258-7350 FAX(06)6258-7360

☎ 0120-080-523 www.colantotte.jp

MA01\_R06

## ■ジョイント部分の取り外し方

留具の根元を持って左右に引っ張って下さい。

### ●TAO ネックレス ベーシック



### ●TAO ネックレス CO. (他) (首の後ろにジョイントがある製品)



### ●TAO ネックレス ベガ



## ■お手入れ方法・その他

- お手入れの際は中性洗剤をご使用のうえ押し洗いし、水気を拭き取り、完全に乾いてからご使用ください。経年による劣化は避けられませんが、少しでも長くご使用いただくために、汗・皮脂・汚れ等が付着した場合は洗い流してください。特に色が薄い商品につきましては、汗・皮脂・汚れ等を放置すると変色する可能性がありますので、こまめなお手入れをおすすめ致します。
- 着脱の際は、必ず留め具の根元とネックループを持ち、水平に行ってください。ループ本体のみを引っ張って取り外しを行わないでください。留め具の着脱テストは行っておりますが、ご使用の仕方によっては、緩み・破損のおそれがありますので取り外しにはご注意ください。
- 長く水につけたり、ぬれた状態で長時間放置及び使用はしないでください。
- 漂白剤・洗濯機・乾燥機などは、使用しないでください。
- シンナー・ベンジンなどの有機溶剤でのお手入れは避けてください。
- 高温のものへ近づけることはお避けください。
- 長くお使いいただくため、入浴時は外してください。